

ACTIVE FOAM


Apósito de espuma de poliuretano muy absorbente con y sin borde adhesivo para heridas agudas y crónicas con exudado moderado y abundante.

APÓSITO DE ESPUMA

ACTIVE FOAM - sin borde adhesivo

Propiedades

- muy absorbente
- no se pega a la herida
- adaptable y suave
- acolchado de protección
- no traumático

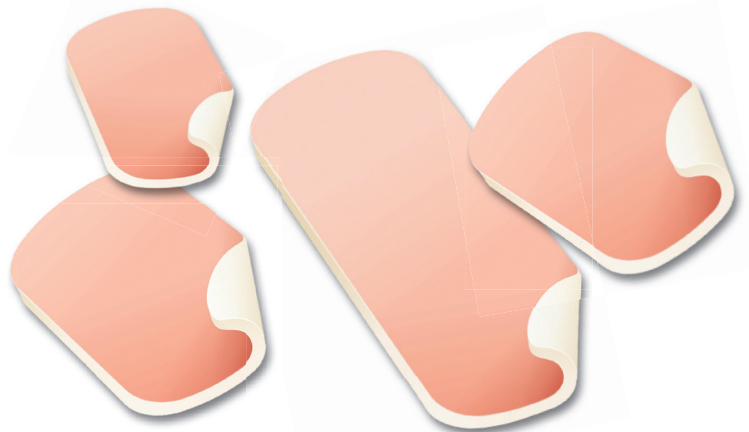

Active® Foam **sin borde adhesivo** es un apósito muy absorbente y no adhesivo de espuma de poliuretano. La estructura de la almohadilla permite mantener húmeda la zona de la herida al tiempo que reduce al mínimo el riesgo de maceración de la piel circundante. El film exterior de poliuretano de color piel es permeable al aire, impermeable al agua y protege la herida de las bacterias y de la suciedad. Active® Foam se puede también usar en combinación con un vendaje compresivo. El apósito se fija mediante una medicación secundaria adecuada.

Indicaciones

- heridas agudas y crónicas
- heridas con exudado moderado y abundante
- úlcera de la pierna, úlcera de decúbito, pie diabético
- zonas donantes de injerto de piel, heridas postoperatorias, abrasiones
- quemaduras de primer y segundo grado
- en combinación con vendajes compresivos



TRUSETAL S.L.

...nos llevamos bien con su piel!



ACTIVE^{FOAM} - con borde adhesivo

Características:

- apósito de espuma de poliuretano
- film exterior adhesivo de poliuretano
- con adhesivo Hot-Melt Pressure-Sensitive
- sin látex

Active[®] Foam **con borde adhesivo** es un apósito muy absorbente de espuma de poliuretano sobre un film autoadhesivo de poliuretano muy fino. Este apósito de espuma fácilmente adaptable puede absorber una gran cantidad de exudado gracias a su tamaño. No se pega a la herida. La estructura de la almohadilla permite mantener húmeda la zona de la herida al tiempo que reduce al mínimo el riesgo de maceración de la piel circundante. El film exterior adhesivo de poliuretano de color piel es transpirable, impermeable y protege contra las bacterias y la suciedad. El adhesivo Hot-Melt Pressure-Sensitive reticulado por UV se adhiere de manera segura, es hipoalérgico y permite que la piel circundante respire.

PEDIDO: FAX DE RESPUESTA / ENVIAR ESCANEADO 983 36 19 21 / trusetal@ecosem.es

Marque por favor: Por favor enviar oferta comercial
 Por favor enviar el siguiente pedido

ACTIVE^{FOAM} - sin borde adhesivo

_____ x 5 cm x 7 cm Uds 10 N° de art.: 70431
_____ x 10 cm x 12 cm Uds 10 N° de art.: 70432
_____ x 10,5 cm x 20 cm Uds 10 N° de art.: 70433
_____ x 15 cm x 17 cm Uds 10 N° de art.: 70434

ACTIVE^{FOAM} - con borde adhesivo

_____ x 8 cm x 10 cm Uds 10 N° de art.: 70429
_____ x 12,5 cm x 12,5 cm Uds 10 N° de art.: 70430

Dirección, sello, detalles de contacto:

Para preguntas o información adicional sobre el producto contacte con:

TRUSETAL S.L.

Autovía A-62, salida km 117 • E-47009 Valladolid
Apdo. de Correos nº 89 • (E-47080) Valladolid

T.983 36 24 97 • F.983 36 19 21

Email: trusetal@ecosem.es
www.tshs.eu | www.ecosem.es

